

Moisture Analyzer



HE73 dan HE53 Halogen Moisture Analyzer

Hasil yang Andal

Pengoperasian Sederhana

Mutu yang Terjangkau



Kadar Air Begitu Penting
Analisis yang Cepat dan Mudah

METTLER TOLEDO

Andal, Mudah, dan Harga Terjangkau Investasi yang Terjamin dalam Kualitas

HE73 dan HE53 halogen moisture analyzer adalah solusi yang andal dan hemat biaya untuk menentukan kadar air produk Anda agar dapat menjaga kualitas dan memastikan masa simpan yang optimal. Moisture analyzer yang andal dan terjangkau ini menerapkan pengalaman luas METTLER TOLEDO dalam instrumen presisi manufaktur dan keahlian analisis kadar air selama bertahun-tahun.

HE73 dan HE53 mudah digunakan, bahkan bagi operator yang tidak terlatih. Dengan fitur bantuan pada layar dan Panduan Kadar Air gratis dari kami, Anda memiliki segala hal yang Anda perlukan untuk segera mengatur dan mulai melakukan pengukuran kadar air yang akurat. Didesain di Swiss, Anda tidak hanya memiliki kepercayaan diri dalam hasil kadar air Anda namun juga akan diyakinkan karena performa yang hebat selama bertahun-tahun yang akan datang.

Hasil yang Andal



HE73 dan HE53 dapat memberikan pengukuran kadar air yang akurat dan konsisten hanya dalam waktu beberapa menit.

- Andal
- Efisien
- Peningkatan produktivitas

Mutu yang Terjangkau



Dapatkan nilai yang luar biasa untuk harga yang sepadan dengan teknologi pengeringan halogen dan unit penimbangan berperforma tinggi.

- Teknologi modern
- Desain kuat
- Masa pakai yang lama

Keahlian Kadar Air



Manfaatkan pengetahuan kami dengan segala hal yang Anda perlukan untuk langsung memulai analisis kadar air.

- Pengaturan cepat
- Pelatihan online
- Metode pengeringan siap pakai



Hasil Kadar Air yang Cepat dalam Proses 3 Langkah yang Mudah

Analisis kadar air tidak pernah semudah ini, cukup ikuti panduan grafis di layar dan hasil Anda akan siap hanya dalam beberapa menit.



1. Tarik piringan timbangan yang kosong.



2. Tambahkan sampel, lalu sebarkan dengan merata.





3. Tekan start. Lihat hasil di layar hanya dalam waktu beberapa menit.

METTLER TOLEDO Service

Jaringan servis kami di seluruh dunia selalu siap mendukung Anda dengan kalibrasi dan pemeliharaan untuk menjaga agar moisture analyzer Anda tetap memiliki performa terbaik.

Data Teknis

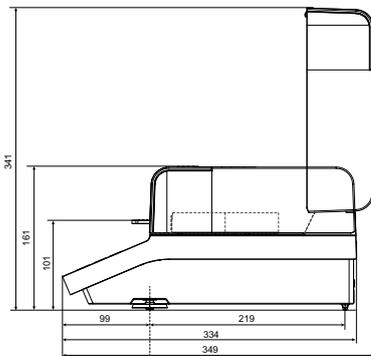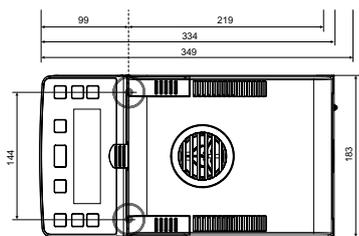

| | HE73 | HE53 |
|-----------------------|--|--|
| Kapasitas | 71 g | 54 g |
| Daya Baca | 1 mg, 0,01% MC | 1 mg, 0,01% MC |
| Kemampuan pengulangan | 0,15% (2 g sampel), 0,05% (10 g sampel) | 0,15% (2 g sampel), 0,05% (10 g sampel) |
| Penonaktifan | Otomatis Penuh, Diwaktu Bebas (1 mg/10 – 140s) | Otomatis, Pengaturan waktu |
| Program Pengeringan | Standar, Cepat | Standar, Cepat |
| Metode Pengeringan | 2 | 1 |
| Kisaran suhu | 50 – 200°C (1°C inkremen) | 50 – 160°C (1°C inkremen) |
| Pemanasan | Halogen | Halogen |
| Tampilan Hasil | %MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g | %MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g |
| Layar | Cahaya latar LCD | Cahaya latar LCD |
| Fungsi Layar | Panduan User, Indikator Progres | Panduan User, Indikator Progres |
| Bobot | 4,1 kg | 4,1 kg |

Aksesori



Pinggan sampel aluminium

Sesuai untuk semua aplikasi agar dapat memastikan kemampuan pengulangan terbaik.

No. Komponen 13865



Filter serat kaca

Gunakan dengan cairan dan pasta untuk meningkatkan kemampuan pengulangan dan mengurangi waktu pengukuran hingga 50%.

No. Komponen 214464



Printer

Cara tercepat untuk mendokumentasikan hasil kadar air Anda.

No. Komponen
11124300 (RS-P25)
11124303 (RS-P26)

www.mt.com/moisture

Untuk informasi lebih lanjut

Mettler-Toledo AG

Laboratory and Weighing Technologies

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Telp. +41 44 944 22 11

Faks +41 44 944 30 60

Perubahan teknis dapat terjadi sewaktu-waktu.

© 11/2014 Mettler-Toledo AG

Dicetak di Swiss 30097242

Global MarCom Switzerland